

## schülke wipes safe & easy

Befüllung unter hygienischen Bedingungen.

safe & easy

bagless system

### Schritt 1

Zum Personalschutz sowie zum Schutz der schülke wipes safe & easy empfehlen wir die Arbeitsfläche und die Hände zu desinfizieren, sowie das Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhen.\*



\* Gemäß TRBA 250, Absatz 4.1.3.



### Schritt 2

Öffnen Sie das selbsthaftende Siegeletikett des Eimers.

Auf hygienisches Arbeiten achten, Handschuhe nicht während der Arbeit kontaminieren!



### Schritt 3

Kleben Sie das Siegeletikett auf die entsprechende Seite des Spendereimers.



### Schritt 4

Ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle ein Stück heraus, gießen Sie einmalig 2 Liter bei einem gebrauchsfertigen Produkt\*\* oder 2,5 Liter Gebrauchslösung aus einem angesetzten Konzentrat\*\*\* langsam spiralförmig über die Vliesrolle im Eimer.



### Schritt 5

Ziehen Sie das innerste Tuch der Vliestuchrolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Verschlusses.



### Schritt 6

Und drehen Sie den Verschluss mit stetigem Druck in die Aussparung im Deckel des Spendereimers.



### Schritt 7

Verwerfen Sie das erste Tuch und verschließen Sie die Schutzkappe des Verschlusses sorgfältig.



### Schritt 8

Füllen Sie das Siegeletikett vollständig aus.



### Schritt 9

Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt.

30 Min.  
warten



### Schritt 10

Das schülke wipes safe & easy Einmal-Feuchttuchspendersystem ist nun einsatzbereit.



Entsorgen Sie bitte den Spendereimer mit etwaigen Produktresten und Tüchern nach Ablauf der Standzeit von bis zu 28 Tagen. Nicht zur Wiederaufbereitung vorgesehen.

\*\* acryl® des, antifact® N liquid, mikrozyd® AF liquid, mikrozyd® sensitive liquid, pursept® A Xpress, terralin® liquid, buraton® rapid, perform® advanced alcohol EL, perform® classic alcohol EP

\*\*\* antifact® AF (N), antifact® extra, antifact® FF, Desinfektions-Reiniger AF, pursept® AF, terralin® protect, perform® classic concentrate Q-Plus, TPH protect

## schülke wipes safe & easy

Hygienic filling up.

safe & easy


bagless system

### Step 1

We recommend that you disinfect your hands and the work surface and wear an overall, protective goggles and gloves\*. This will protect you and the schülke wipes.



\* as required by paragraph 4.1.3 of TRBA 250

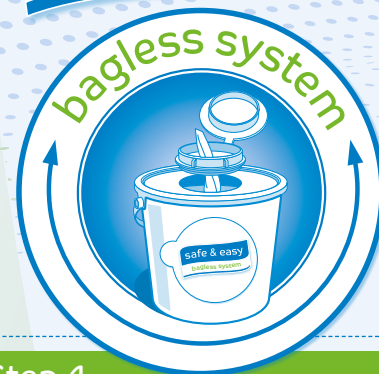

### Step 2

Open the bag by peeling off the self adhesive sealing label.

Make sure you work hygienically. Do not let your gloves become contaminated during the procedure.




### Step 3

Stick the sealing label on the appropriate side of the dispenser box.



### Step 4

Find the innermost wipe in the roll and pull it out slightly. Pour 2 litres of ready-to-use product\*\* or 2.5 litres of diluted concentrate\*\*\* solution once slowly in a spiral shape over the roll of wipes in the bucket.

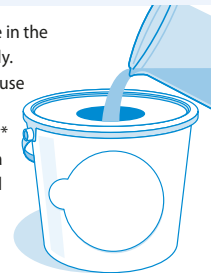

### Step 5

Pull the innermost wipe in the roll through the star-shaped opening.



### Step 6

Screw the lid onto the bag.



### Step 7

Throw away the first wipe and thoroughly close the protective cap.



### Step 8


Write all the necessary information on the sealing label.



### Step 9

The wipes take 30 minutes to become fully saturated.

Wait 30 minutes

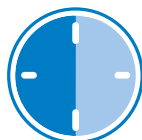

### Step 10

The schülke wipes safe & easy are now ready to use.



Please dispose the bucket with any remaining product and wipes in the correct way after the expiry date of 28 days has been reached. Not intended to be reprocessed.

\*\* acryl® des, antifact® N liquid, mikrozyd® AF liquid, mikrozyd® sensitive liquid, pursept® A Xpress, terralin® liquid, buraton® rapid, perform® advanced alcohol EL, perform® classic alcohol EP

\*\*\* antifact® AF (N), antifact® extra, antifact® FF, Desinfektions-Reiniger AF, pursept® AF, terralin® protect, perform® classic concentrate Q-Plus, TPH protect