

schülke -+

Edel. Sauber. Hygienisch.

Die schülke Edelstahl-Hygienekombis:
Hygiene aus einer Hand.



the plus of pure
performance

Hygienekombi – aus einer Hand.



Kompetenz, Erfahrung, Zuverlässigkeit und Spezialisierung.

Wir bieten Ihnen ein Hygienekonzept aus einer Hand. Mit unserem Einrichtungsprogramm für Rein- und Unreinräume in Krankenhäusern, Pflegeheimen – und ähnlichen Pflege-/Arbeitsbereichen mit hohen hygienischen Anforderungen – bieten wir Ihnen ein auf den Arbeitsprozess ergonomisches, zeitgemäßes, abgestimmtes System an.

Das Portfolio reicht von Geräten (Spender, Dosieranlagen, Steckbeckengerät etc.) bis hin zu Schranksystemen, Regalen, Waschbecken, Halterungen u.v.m., die unter hygienischen Kriterien den täglichen Herausforderungen des Alltags standhalten.

Auf einen Blick: Unser Service für Sie.

- **Technische Beratung**
Hygienekombinationen, Dosiertechniken, Steckbeckengerät und Präparatespender
- **Planung**
Konzeptentwicklung für Arbeitsräume und Bearbeitung von Ausschreibungen
- **Montage**
Auf Anfrage möglich
- **Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur**
Hygienepaneel, Dosieranlage und Steckbeckengerät sowie Einweisung des Personals
- **Einrichtung**
Das Sortiment reicht von den hygienischen doppelwandigen Schranksystemen, Desinfektionspräparaten bis hin zur komfortablen Wärmeplatte für körpertemperierte Steckbecken.

Hygienekombinationen aus Stahl und Edelstahl.

Unsere Standards ganz individuell.



Hygienekombi 1

Hygienepaneel komplett mit Steckbeckenspüler und Ablageregal für Waschschüssel, Steckbecken.



Hygienekombi 2

Zusätzlicher Unterschrank mit ausziehbarem Schubfach aus Edelstahl.

Auf Wunsch mit integriertem Waschbecken.



Hygienekombi 3

Unser Alleskönner!

Komplett mit Steckbeckenspüler, Ablageregal, Hängeschrank sowie Ober- und Unterschrank inklusive Waschbecken.

► Hygienekombis individuell nach Wunschvorstellungen und Anforderungen erweiter- und kombinierbar!

Hygienepaneel – der Allrounder.

Das kompakte System mit minimalem Planungs- und Montageaufwand.

Unser kleines aber sehr vielseitiges Hygienepaneel:

Ausgussbecken inkl. Ringspülung, integriertes Desinfektionsmittel-Dosiergerät, Mischbatterie sowie Wandspender zur berührungslosen Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen als Komplettlösung für kleine Spül- und Putzräume. Ganz einfach an die Wand gestellt, anschließen – fertig und los!



Unser Plus – Arbeitsschutz:

Der Präparatekanister sowie sämtliche Arbeitsschutz-Utensilien für den Kanisterwechsel befinden sich an fest definierten, schnell erreichbaren Stellen im Unterschrank.

- kein schweres Heben von Kanistern auf Konsole des Dosiergerätes mehr erforderlich
- arbeitssicheres Handling





Integriertes RKI-geprüftes Desinfektionsmittel-Dosiergerät

- übersichtliches Bedienfeld mit Klartextanzeige
- leichte Bedienung
- Mengenvorwahl
- sensorüberwachte Dosierung
- Dosierbereich 0,25 % – 0,5 %
- optional: Bis zu drei Dosierungen (zur schnellen Einsatzkonzentrationsveränderung bei einem Ausbruchsfall durch den Betreiber)



Integrierte Ringspülung gemäß DIN 1988

- effektive Spülung des Ausgussbeckens
- einfache Bedienung durch Druckknopf
- wirtschaftlich, da ohne Elektroenergie




Berührungsloser Wandspender zur hygienischen Händedesinfektion, dadurch erhöhter Hygiene-Standard.



Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch eine zusätzliche Konsole zum Befüllen von z. B. Wischeimern.

Unsere individuellen Extras!

Features auf einem Blick.

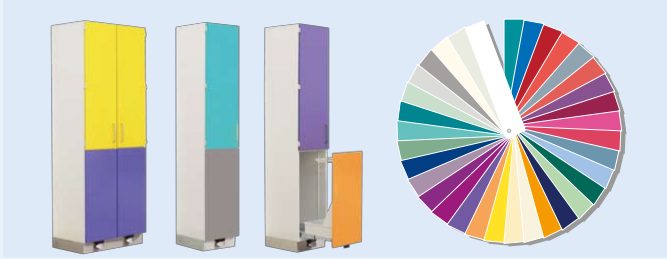

Farbe nach Geschmack

Wir haben für jeden die passende Farbe im Programm – von Pastell über kräftige Töne bis zum üblichen Stahl. (Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen nicht vermeidbar).

Komplettes Zubehörprogramm

- Wandspender manuell (Typ KHK/Typ KHL) oder touchless (KH touchless)
 - Papierspender • Halter für Einweghandschuhe
 - optional: Augenspüllösung inkl. Halterung
- Hygieneplanerstellung durch schülke möglich



Der kompakte und leistungsstarke Steckbeckenspülautomat

- für ein Steckbecken oder zwei Urinflaschen
- für eine Waschschüssel oder einen Stuhleimer

Die vollautomatische Klappenöffnung


– auf Wunsch mit Fuß- oder Wandschalter zur hygienischen Betätigung – schränkt die Kontaminationsgefahr für Patient und Nutzer ein.



Spezielle umlaufende Türdichtungen sowie die doppelwandige Bauweise ermöglichen „schepperfreies“ Öffnen und Schließen der Türen sowie staubgeschützte Lagerung.

benutzerfreundliche Arbeitshöhe



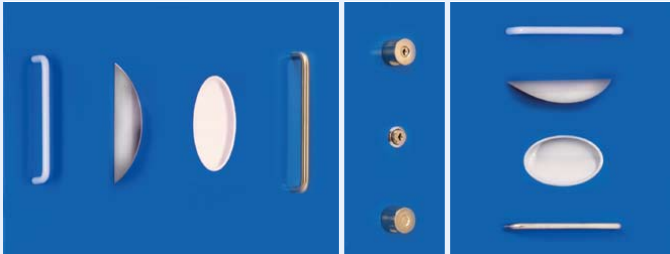

Türgriff, Schubladengriff und
Schlossausführung frei wählbar


optionale Wärmeplatte
für 24 Stunden warme Steckbecken



optional:
Wasserfilter

Sterile Filterkapseln für Einmalanwendungen, um mikrobiologisch reines Wasser (inkl. Legionella) für 7 Tage (schülke filtration 7A), 14 Tage (14A) und 30 Tage (30A) zu garantieren. Unser Filtersortiment setzt das Risiko der Querkontamination in Bereichen mit sehr hohem Risiko wie Verbrennungseinheiten, Intensivstationen (ICU), Operationsräumen usw. herab.

Mehr Informationen zu unseren Produkten
finden Sie hier:

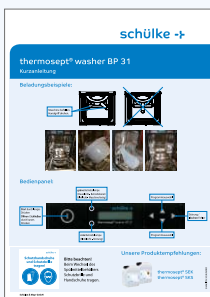

Kurzanleitung zum
thermosept® washer BP 31
2446



Folder
Steckbeckenhygiene
117



Dokumentation
thermosept® washer BP 31
2090



Folder
Hygienetechnik
237



Folder
Wasserfilter
126

Sprechen Sie uns noch heute an – wir beraten Sie gerne!

Ihr Service-Techniker vor Ort oder direkt in der Zentrale.

Service-Technik | Tel: +49 (0) 40 / 521 00-269 | www.schuelke.com | info@schuelke.com

Service aus reiner Hand:

Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen und Unterlagen:

Kundenbetreuung | Verkauf | Service

Telefon 040/521 00-214 Telefon 040/521 00-269
Telefax 040/521 00-228 Telefax 040/521 00-228

Post: 22840 Norderstedt | E-Mail: ST.Norderstedt@schuelke.com

- 1 | **Dirk Bartels**
E-Mail: dirk.bartels@schuelke.com
Mobil: 0171/2464119
- 2 | **Dirk Winter**
E-Mail: dirk.winter@schuelke.com
Mobil: 0171/6379667
- 3 | **Tobias Kring**
E-Mail: tobias.kring@schuelke.com
Mobil: 0172/9982449
- 4 | **Markus Radon**
E-Mail: markus.radon@schuelke.com
Mobil: 0172/9264850
- 5 | **Heiner Franke**
E-Mail: heiner.franke@schuelke.com
Mobil: 0171/2494003
- 6 | **Felix Grohs-Vekeman**
E-Mail: felix.grohs-vekeman@schuelke.com
Mobil: 0171/6305470
- 7 | **Detlef Göddel**
E-Mail: detlef.goeddel@schuelke.com
Mobil: 0172/4058022
- 8 | **Maik Böttcher**
E-Mail: maik.boettcher@schuelke.com
Mobil: 0171/2466104
- 9 | **Wenzel Holecek**
E-Mail: wenzel.holecek@schuelke.com
Mobil: 0171/2495594
- 10 | **Rene Schmidt**
E-Mail: rene.schmidt@schuelke.com
Mobil: 0172/4058020
- 11 | **Stefan Kletzenbauer**
E-Mail: stefan.kletzenbauer@schuelke.com
Mobil: 0171/6375820



Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 521 00-0 | -318
www.schuelke.com

Ein Unternehmen der
Air Liquide-Gruppe

