

schülke -t



dosiT[®] des

Dosiergerät zur Herstellung und zum Ausbringen wässriger Desinfektionsmittellösungen.

Unser Plus:

- mikroprozessorgesteuertes System
- Überwachung des kompletten Dosiervorganges durch Sensoren
- Dosierbereich: 0,25 % – 5 % in 0,05 % Schritten einstellbar Dosiertoleranz + 5 %
- Lösungsabgabe drucklos direkt am schwenkbaren Auslauf
- automatische Abschaltung bei Konzentrat- bzw. Wassermangel sowie Konzentratflussunterbrechung
- Klartextanzeige aller Betriebszustände inkl. der eingestellten Konzentrationen
- Netztrennung nach DIN 1988, Teil 4/TRWI)/EN 1717
- nach RKI- Richtlinie geprüft (Zertifikat-Nr.: 99189)

Anwendungsgebiete

dosiT[®] des ist ein mikroprozessorgesteuertes Gerät zur Herstellung von gebrauchsfertigen Desinfektionsmittellösungen für die Instrumenten- und Flächendesinfektion bis 5 %.

Es sind alle gängigen Flächen- und Instrumentendesinfektionsmittel einsetzbar, deren Viskosität < 50 mP·s ist.

- Das Gerät ist für den dezentralen, stationären Einsatz vorgesehen und gibt die Gebrauchslösung drucklos ab.
- Die Betriebszustände werden über ein 32-stelliges Klartextdisplay angezeigt.
- Die Bedienung und Programmierung erfolgt über eine Folientastatur.
- Die Einstellung der Desinfektionsmittelkonzentrate ist in 0,05 %-Schritten möglich. Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und formschön abgeschrägt. Die Sauglanze und Kanisterhalter sind wahlweise rechts oder links am Gerät montierbar. Die Auffangschale der Kanisterkonsole ist zur Reinigung leicht entnehmbar.

- Die geprüfte Netztrennung ermöglicht den direkten Anschluss an eine Trinkwasserleitung.
- Das Gerät wird nach allen gängigen Vorschriften gebaut und geprüft (VDE, EMV, RKI).

Produkteigenschaften

Technische Daten	
Abgabemenge:	7 l/Min
Dosierbereich:	0,25 % – 5 %
Dosiertoleranz:	+ 5 %
Kaltwasseranschluss:	3/8" Aussengewinde, Messing
Wasserzulaufdruck:	1,5 – 10 bar
Stromversorgung:	230 V/~ 50 Hz
Leistung:	max. 75 Watt
Anschlusskabel:	1,5 M mit Typ 12-Stecker
Masse:	
H	578 mm
W	510 mm
D	180 mm
Leergewicht:	12 kg



Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Dosiergerät dosit des - CH -	1/Karton	644100

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information


Einen Überblick zu unseren Produkten sowie die vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com

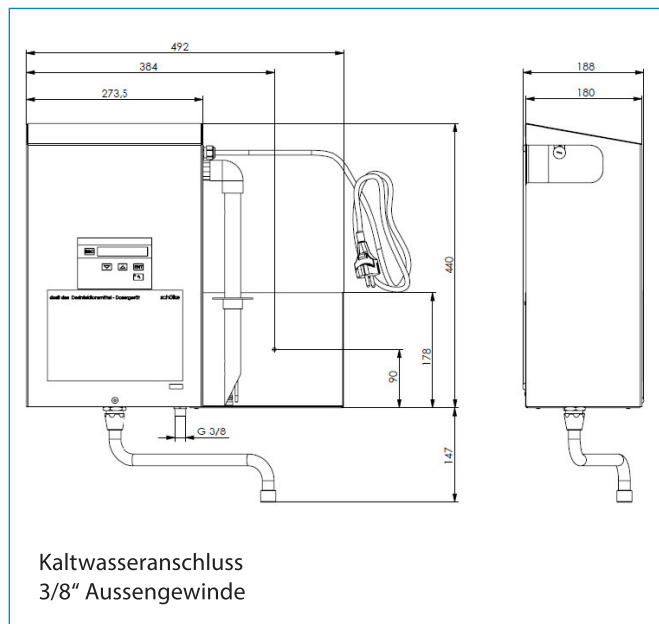

Montagehinweise

- Elektroanschluss 1.5 m serienmässig mit Typ 12-Stecker links oder rechts montierbar
- Kaltwasseranschluss 3/8" aussen
- Konsole alternativ links oder rechts montierbar

Optionen	Art.-Nr.
Zweite und dritte alternativkonzentration	644014



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com