


schülke -†

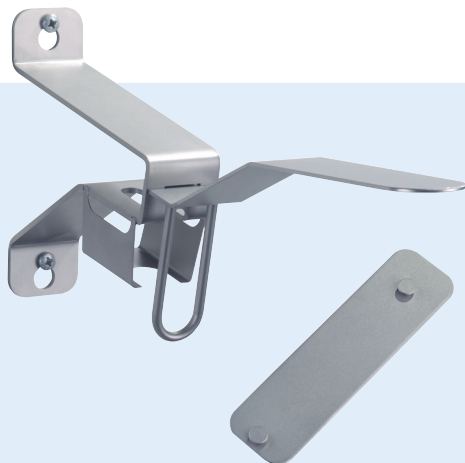

Sprühflaschenhalter geeignet für die Reinraumklassen A/B

perform[®] spray bottle holder

Unser Plus:

- kompatibel mit allen Produkten mit Sprühkopf der perform[®]-Linie
- vollständig autoklavierbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- einfache Montage

Funktionsbeschreibung

Der perform[®] spray bottle holder kann speziell für den Einsatz der Handschuhdesinfektion in Verbindung mit den Produkten aus der perform[®]-Linie genutzt werden. Kompatibel ist dieser Halter mit den gebrauchsfertigen 500 ml- und 1-Liter-Sprühflaschen, wie z. B. für die Produkte perform[®] sterile alcohol IPA oder perform[®] sterile alcohol EP.

Der perform[®] spray bottle holder besteht aus Edelstahl und ist autoklavierbar.

Einsatzbereich

Mit dem perform[®] spray bottle holder steht Ihnen eine einfache Applikationstechnik zur Verfügung, die besonders für den Einsatz in Reinräumen der Klasse A/B geeignet ist.

Montage

Es gibt zwei Möglichkeiten, den perform[®] spray bottle holder zu montieren:

- Der perform[®] spray bottle holder kann mit zwei Bohrlöchern an der Wand montiert werden.
- Mit Hilfe einer extra Platte kann der perform[®] spray bottle holder an die Wand geklebt werden. Er kann dadurch problemlos an die Platte angehängt werden und zur Reinigung wieder abgehängt werden. Für die Befestigung der Platte empfehlen wir hier unser glabete Klebersystem. Eine solche Montage durch Kleber und Platte erleichtert das regelmäßige Autoklavieren des perform[®] spray bottle holder.

Technische Daten

Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T)	165 x 38 x 320 mm
Material	Edelstahl V2A

Bestelldaten

Spender/ Zubehör	Art.-Nr.
perform [®] spray bottle holder	693540
perform [®] spray bottle holder Platte	693541
glabete Klebesystem	669305

Folgende Präparate werden in Kombination mit dem Pharma perform[®] spray bottle holder angeboten:

Artikelbezeichnung		Art.-Nr.
perform [®] sterile PAA	500 ml-Fasche	100081
perform [®] sterile alcohol EP	500 ml-Fasche	121802
perform [®] sterile alcohol IPA	500 ml-Fasche	136406
perform [®] sterile alcohol IPA	1 l-Fasche	136408
perform [®] sterile alcohol IPA WFI	500 ml-Fasche	121101
perform [®] sterile Cleaner ND	500 ml-Fasche	182002

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

perform[®] spray bottle holder

Umweltinformationen

schulke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Informationen

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com