

schülke →

Technik der Sauberkeit

Hygienetechnik von schülke.



Inhaltsverzeichnis

Dosierset & Wandspender aus Kunststoff	S. 2	ZSVA-Anlagen	S. 8
Wandspender aus Metall	S. 3	Wasserfilter	S. 9
Zubehör Spender	S. 4	Technik für die Industrie	S. 10/11
Dosiergeräte	S. 5	Service aus reiner Hand	S. 11
Hygienepaneel	S. 6	Das Robert Koch-Institut empfiehlt:	
Steckbeckenspüler	S. 7	Aufbereitung KH-Spender / sm-Spender	S. 12/13

Gute Hygieneprodukte können ihre Wirkung erst voll entfalten, wenn sie richtig dosiert und angewendet werden. Hier kommt die schülke Hygienetechnik ins Spiel. Exakte Dosierung, sichere Anwendung und sinnvolle Applikation führen zu optimalen Ergebnissen!

Dosierset



Dosierset

Für 450 / 500 ml und 1 l Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotionen

Unser Plus

- Set bestehend aus Halterung und Pumpe

Produkte

Art.-Nr.

für 450 / 500 ml	134406
für 1 l	134405

Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüre Applikationshilfen an.



Folder
Applikationshilfen
Mat-Nr. 2562



Folder
Applikationshilfen
Bereich Haut / Hände
Mat-Nr. 2659

Wandspender aus Kunststoff

sm 2 universal / sm 2 500

Präparate-Spender sm 2 500 für alle 450 / 500 ml-Flaschen;
Präparate-Spender sm 2 universal für Flaschen von 450 / 500 ml bis 1.000 ml (inkl. 1 l-Euroflasche)

Unser Plus

- einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen
- keine Rückverkeimung und Verdunstung durch einzigartige Pumpenfunktion und integrierten Flaschenverschluss
- Dosierung des Präparats durch den verstellbaren Dosierhub in Mengen von 1, 2 oder 3 ml je Hub
- Berücksichtigung der unterschiedlichen Viskositäten der Präparate durch Abstimmung des Pumpsystems und Auslaufventils
- kein Nachtropfen, kein Auslaufen, kein Eintrocknen, kein Verdunsten, keine Rückverkeimung
- einfaches Entfernen des Spenders aufgrund der vorhandenen Wandplatte

Abmessungen | Art.-Nr.

sm 2 universal

Breite:	10,4 cm
Tiefe:	21,0 cm (mit Armhebel)
Höhe:	30,0 cm
☐ Art.-Nr.:	668500
☒ Art.-Nr.:	668505

sm 2 500

Breite:	8,6 cm
Tiefe:	20,5 cm (mit Armhebel)
Höhe:	27,0 cm
☐ Art.-Nr.:	668600



Zur besseren Unterscheidung der Präparate, nun in zwei Farben.

Wandspender aus Metall: Die schülke KH-Spender

Typ KHK 500 | 1.000

Unser Plus

- einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegepräparaten
- Dosierung der Präparate durch ein Dosierrad in der Menge von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml je Hub
- Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium, Armhebel aus Edelstahl
- Sicherung eines störungsfreien Präparatefluss durch die austauschbare Pumpe aus Edelstahl bzw. Kunststoff
- Entfernen des Spenders durch lösen von der Wandplatte
- **Typ KHK 500:** für alle markt gängigen 350 – 500 ml-Flaschen
- **Typ KHK 1.000:** für alle markt gängigen 1.000 ml-Flaschen (schülke Euroflasche)
- Ausführungen mit kurzem Armhebel



*1 Spenderausführung mit Kunststoffpumpe
*2 Spenderausführung mit Edelstahlpumpe

Abmessungen | Art.-Nr.

KHK 500

Breite x Tiefe x Höhe: 8,2 x 16,2 x 24,5 cm

Art.-Nr.: *1	669600
Art.-Nr.: *2	669602
Art.-Nr.: *1	669606
Art.-Nr.: *1	669604
Art.-Nr.: Counter *1	669605

KHK 1.000

Breite x Tiefe x Höhe: 8,2 x 16 x 29 cm

Art.-Nr.: *1	669700
Art.-Nr.: *2	669702
Art.-Nr.: *1	669706
Art.-Nr.: *1	669707
Art.-Nr.: Counter *1	669705

Typ KHL 500 / 1.000

Unser Plus

- **Typ KHL 500:** für alle markt gängigen 350 ml – 500 ml-Flaschen
- **Typ KHL 1.000:** für alle markt gängigen 1.000 ml-Flaschen (schülke Euroflasche)
- Ausführungen mit langem Armhebel



Abmessungen | Art.-Nr.

KHL 500

Breite x Tiefe x Höhe: 8,2 x 21,5 x 24,5 cm

Art.-Nr.: *1	669610
Art.-Nr.: *2	669612
Art.-Nr.: Counter *1	669615

KHL 1.000

Breite x Tiefe x Höhe: 9,2 x 22 x 29 cm

Art.-Nr.: *1	669710
Art.-Nr.: *2	669712
Art.-Nr.: Counter *1	669715

Typ KH touchless

Unser Plus

- berührungsloser Präparatespender
- für alle markt gängigen 500 ml oder 1.000 ml-Flaschen (schülke Euroflasche)



Abmessungen | Art.-Nr.

Breite x Tiefe x Höhe: 9,2 x 21 x 29 cm

Art.-Nr.: 1.000 ml *2	669550
Art.-Nr.: 500 ml *2	669540
Art.-Nr.: Counter *2	auf Anfrage

Aufbereitung des Spenders Typ KH und sm2

- ➔ Auf den letzten Seiten finden Sie eine Anleitung zum Heraustrennen



Zubehör

Drägerschienenhalterung

- Adapter aus Edelstahl zur Befestigung von KH-Spendern an einer Drägerschiene



500 ml-Spender	Art.-Nr.: 669313
1.000 ml-Spender	Art.-Nr.: 669314

Rohrrahmenhalterung

- Adapter aus Edelstahl zur Befestigung von KH-Spendern an Betten, Stationswagen, etc.
- mit Halterung für runden Rohrrahmen



500 ml-Spender	Art.-Nr.: 669311
1.000 ml-Spender	Art.-Nr.: 669312

Winkelplatte

- Winkelplatte aus Aluminium zur Befestigung von KH-Spendern parallel zur Wand



500 ml-Spender	Art.-Nr.: 669319
1.000 ml-Spender	Art.-Nr.: 669320

Counter


- eingebaute Zählfunktion
- präzise Verbrauchsmessung der durchgeführten Händedesinfektionen
- Bewertung u. Archivierung der abgelesenen Zählerdaten möglich

Die unterschiedlichen Ausführungen sowie Art.-Nr. finden Sie in der Auflistung der schülke KH-Spender auf Seite 3.



Schalenhalter

- für alle KH-Spender erhältlich

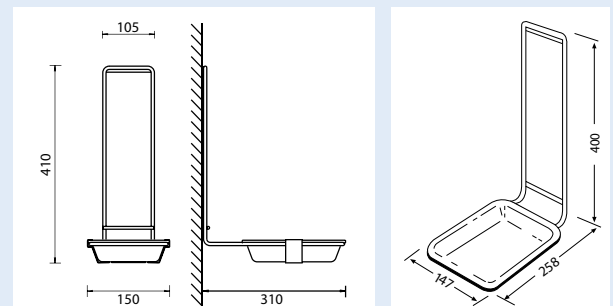

500 ml-Spender	Art.-Nr.: 669240
1.000 ml-Spender	Art.-Nr.: 669390
KH touchless	Art.-Nr.: 669560
sm 2 universal/ sm 2 500	Art.-Nr.: 668510

Verschlussplatte

- für alle KH Spender erhältlich

500 ml-Spender	Art.-Nr.: 669620
1.000 ml-Spender	Art.-Nr.: 669720
KH touchless	Art.-Nr.: 669555



Ersatzpumpe

- für alle KH-Spender erhältlich

Edelstahlpumpe für 500 ml-Spender	Art.-Nr.: 669601
Edelstahlpumpe für 1.000 ml-Spender	Art.-Nr.: 669701
Kunststoffpumpe für 500 ml-Spender	Art.-Nr.: 669611
Kunststoffpumpe für 1.000 ml-Spender	Art.-Nr.: 669711
Ersatzpumpe sm 2 universal/ sm 2 500	Art.-Nr.: 668540

Dosiergeräte

Zur Herstellung von gebrauchsfertigen Desinfektionsmittellösungen.

dosit® des

Dosiergerät zur Herstellung und Ausbringung wässriger Desinfektionsmittellösungen

Unser Plus

- Dosiergerät zur Herstellung und Ausbringung wässriger Desinfektionsmittellösungen
- mikroprozessorgesteuertes System
- Überwachung des kompletten Dosiervorgangs durch Sensoren
- Dosierbereich 0,25 – 5 %, Dosiertoleranz + 5 %, in 0,05 % Schritten einstellbar
- besonders bedienerfreundlich durch übersichtliches Bedienungsfeld und leichten Kanisterwechsel
- nach RKI-Richtlinie geprüft (Zertifikat-Nr.: 99189)
- RKI-Jahresprüfung
- Sauglanze und Kanisterhalter wahlweise links oder rechts am Gerät montierbar
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) sowie DIN EN 1717
- automatische Abschaltung bei Konzentrat- bzw. Wassermangel sowie Konzentratflussunterbrechung

Abmessungen | Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe:	51 x 18 x 57,8 cm
Abgabemenge:	7 Liter / Minute
Netzspannung:	AC 230 V - 50 Hz
Leistung:	75 Watt
Wasseranschluss:	3/8" Außengewinde
Art.-Nr.:	644000
Abschließbare Kanisterhalterung	
Art.-Nr.:	644017

Optional zweite oder dritte Alternativ-Konzentration einstellbar.

Dosiergerät D

Zentrales Druckgerät zur Herstellung wässriger Desinfektionsmittellösungen

Unser Plus

- zur Herstellung und zum Ausbringen wässriger Desinfektionslösungen
- Lösungsabgabe durch Nutzung des hauseigenen Wasserdrucks – ohne Druckerhöhung
- Versorgung von Steckbeckenspülen, Sprühlanzen oder festverrohrten Entnahmestellen
- 5 Dosierstufen: 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 3 %; Dosiertoleranz: max. + 5 %
- mikroprozessorgesteuerte und -überwachte Dosierung
- Anzeige der Betriebszustände und Funktionsstörungen im Display
- Sauglanze und Kanisterhalter wahlweise links oder rechts am Gerät montierbar
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) sowie DIN EN 1717
- automatische Abschaltung bei Konzentrat- bzw. Wassermangel sowie Konzentratflussunterbrechung

Abmessungen | Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe:	51 x 21 x 38 cm
Abgabemenge:	8 Liter / Minute
Netzspannung:	AC 230V - 50Hz
Steuerspannung:	21 V/8 V
Leistung:	96 Watt
Wasseranschluss:	1/2" Außengewinde
Lösungsabgang:	1/2" Außengewinde
Abwasseranschluss:	1/2" Außengewinde
Zulaufdruck:	1,5 min. – 6 bar max.
Art.-Nr.:	648000



Hygienepaneel

Das kompakte System mit minimalem Planungs- und Montageaufwand.



Das besondere Highlight:

Unser kleines aber sehr vielseitiges Hygienepaneel.

Ausgussbecken inkl. Ringspülung, integriertes Desinfektionsmittel-Dosiergerät, Mischbatterie sowie Wandspender zur berührungslosen Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- oder Pflegelotionen als Komplettlösung für kleine Spül- und Putzräume. Ganz einfach mit wenigen Handgriffen montiert!

Technische Daten

Material:	Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen (H x B x T):	2.100 mm x 500 mm x 525 mm
Kalt-/Warmwasseranschluss:	18 l/min, 2 – 8 bar geräteseitig: ¾" RG bauseitig: Absperrventil, Anschlussstück R3/4" mit Außengewinde flächdichtend
Stromversorgung:	230 V / ~ 50 Hz mit Schuko-Stecker
Abwasser:	Sifon DIN70

Bestellung

	Art.-Nr.
Hygienepaneel	682000



➡ Das Hygienepaneel ist individuell erweiterbar zur Hygienekombination.


Hygienekombinationen aus Stahl und Edelstahl von schülke:
Edel, sauber und hygienisch.



Hygienekombis:

Individuell nach Wunschvorstellungen und Anforderungen erweiter- und kombinierbar!

Komplett mit Steckbeckenspüler, Ablageregal, Hängeschrank sowie Ober- und Unterschrank inklusive Waschbecken.

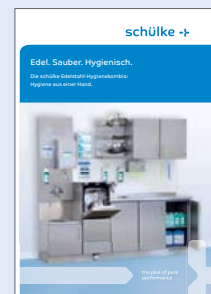

Folder
Edelstahleinrichtungen
Mat-Nr. 2487

Steckbeckenspüler

Der thermosept® washer BP 31.

Kompakt und leistungsstark! Der thermosept® washer BP 31 ist ein kompakter Steckbeckenspüler mit hoher Kapazität, welcher eigens für Krankenhäuser, Pflegeheime, Privatkliniken etc. mit Bedarf für das Spülen von Steckbecken, Urinflaschen u. a. m. entwickelt wurde. Qualität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit stehen im Vordergrund. Das Gerät ist zudem so konstruiert, dass es an die Platzverhältnisse angepasst werden kann.

Es kann

- direkt an der Wand montiert werden
- auf dem Boden auf einem Sockel aufgestellt werden

Der computerüberwachte Spülvorgang und die rotierenden Spülköpfe gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität des Spülergebnisses.

thermosept® washer BP 31

Zur maschinellen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

Unser Plus

- Die Klappe dient als Ausguss: Steckbecken und Urinflaschen werden beim Schließen der Klappe automatisch entleert
- Totaldesinfektion
- minimierter Dampfaustritt beim Öffnen durch Dampfkondensator

Für ausführliche Informationen zu unserem Steckbeckenspüler fordern Sie bitte die Steckbeckenhygiene Broschüre an.

Produkt

Art.-Nr.

thermosept® washer BP 31 (400 Volt / 16 Ampere)	681000
thermosept® washer BP 31 (400 Volt / 16 Ampere) inkl. NetCom	681005
thermosept® washer BP 31 (230 Volt / 16 Ampere) inkl. NetCom	681100
Sockel für BP 31 (Höhe 30 cm)	681130


Zubehör

Art.-Nr.

Fußbedienung	681150
Ellbogenbedienung	681140
Kleinteilekorb	681110
Dosierpumpe	681120



Informationsmaterial

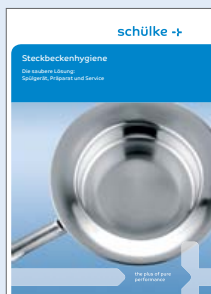

Folder
Steckbeckenhygiene
Mat.-Nr. 117



Dokumentation
thermosept® washer BP 31
Mat.-Nr. 2090



ZSVA-Anlagen

Anlagen zum Einsatz in Zentralsterilgutversorgungsabteilungen (ZSVA).

pump des touch


Die Umpumpstation-Spezialanlage für den Einsatz in der ZSVA

Unser Plus

- zentrale Versorgung aus Großgebinden
- Reduzierung der Logistik und Lagerhaltung von Kleinabfüllungen
- automatische Fassumschaltung von Fass 1 auf Fass 2
- Förderung von bis zu 10 Produkten mit einer Anlage

Art.-Nr.

692000

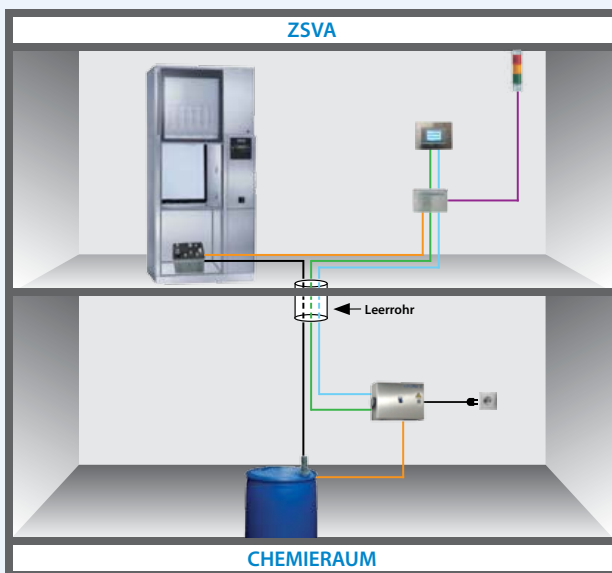

Der Aufbau

Spannungsversorgung (5 x 1 mm ²)	→ 1 x je Anlage
Bus-Leitung (1 x 2 x 0,35 mm ²)	→ 1 x je Anlage
Produktleitung	→ 1 x je Großgebinde
Steuerleitung (7 x 0,5 mm ²)	→ 1 x je Großgebinde
Signalleitung (5 x 1 mm ²)	→ 1 x je Anlage



Für weitere Informationen
fordern Sie gerne unsere
Broschüre Umpumpstation an.

Folder Umpumpstation
Mat.-Nr. 430



Wasserfilter

schülke filtration

Auf der Grundlage unseres Joint Venture mit Laboratoires Anios und unserer Erfahrung haben wir sterile Filterkapseln für Einmalanwendungen entwickelt, um mikrobiologisch reines Wasser (inkl. Legionella) für 7 Tage (filtration 7A), 14 Tage (filtration 14A) und 30 Tage (filtration 30A) zu garantieren. Unser Filtersortiment setzt das Risiko der Querkontamination in Bereichen mit sehr hohem Risiko, wie Verbrennungseinheiten, Intensivstationen (ICU), Operationsräumen usw., herab.

Unser Plus

- Einfaches Wechseln des Filters durch CPC-Einkauf
- Wirksam gegen alle Bakterien inkl. Legionella
- Umfassend begutachtete Leistungsdauer und Qualität
- Geringe Anfälligkeit

Zubehör

Art.-Nr.

	CPC Schnellkupplung mit 3/8" Außengew.	693925
	Reduziermuffe von 1/2" auf 3/8"	693926
	Auslauf-Adapter - um einen mit Kupplung versehenen Hahn wieder als Wasserhahn zu verwenden.	693936
	Duschgriff exklusiv 2 x 1/2" Außengew.	693930
	CPC Schnellkupplung mit 1/2" Außengew.	693935
	CPC Schnellkupplung mit M 22 x 1 Innengew.	693937
	CPC Schnellkupplung mit M 24 x 1 Außengew.	693938
	Großdusche Auslaufanschluss	
	Flacher Auslaufanschluss	
	Großdusche mit Handgriff	

Produktbezeichnung

wirksam gegen

Auslauf

Art.-Nr.

	filtration 7A d	Alle Bakterien inkl. Legionellen	Großdusche	693902
	filtration 7A s	Alle Bakterien inkl. Legionellen	Flach	693903
	filtration 14A d	Alle Bakterien inkl. Legionellen	Großdusche	693913
	filtration 14A s	Alle Bakterien inkl. Legionellen	Flach	693911
	filtration 30LPA d	Legionellen	Großdusche	693920
	filtration 30LPA s	Legionellen	Flach	693921
	filtration 31DA d	Alle Bakterien inkl. Legionellen	Großdusche	693922
	filtration 31DA s	Alle Bakterien inkl. Legionellen	Flach	693923
	shower filtration 31 LPS	Legionellen	Großdusche	693916
	shower filtration 31 DS	Alle Bakterien inkl. Legionellen	Großdusche	693915

€ 0459

Hinweis: Wasserfilter werden im 10er Karton geliefert.



Für ausführliche Informationen zu unseren Wasserfiltern fordern Sie bitte den schülke filtration Folder an.

Folder Wasserfilter
Mat-Nr. 126



Technik für die Industrie

Zum Einsatz im industriellen und lebensmittelverarbeitenden Bereich.

sm 8®-Schaum



Unser Plus

- Betrieb nur mit Wasserenergie
- Spülen, Schäumen oder Versprühen in einem
- einfache Bedienung durch Hebelschaltung
- Dosierung stufenlos einstellbar bis 2 %
- kein Nachfüllen – nur Austausch des Produktgebides
- Montageplatte und Haube aus Edelstahl
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) sowie DIN EN 1717
- Ausbringpistole mit Spüldüsen, Schaumdüse und ergonomischer Verlängerungslanze

Abmessungen | Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe:	28,3 x 10,0 x 40,0 cm
Durchflussmenge:	10 Liter / Minute bei 3 bar
Dosierung:	stufenlos einstellbar bis 2 %
Wasseranschluss:	3/4" Überwurfverschraubung mit Steckkupplung für Ausbringpistole
Tropfwasserleitung:	NW 50, bauseits ableiten
Fließdruck:	3 – 5 bar bauseits bei höherem Druck bauseits Druckminderer vorsehen
Art.-Nr.:	626000

dosit® trio



Unser Plus

- Betrieb nur mit Wasserenergie
- einfache Bedienung
- drei verschiedene Lösungen mit unabhängigen Dosierungen
- kein Umfüllen des Produktes notwendig – nur Austausch des Produktgebides
- Montageplatte und Haube aus Edelstahl
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI)
- Lösungsabgabe über Schwenkauslauf
- keine Vermischung der Lösungen innerhalb des Gerätes möglich

Abmessungen | Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe	28,3 x 10 x 40 cm
Wasseranschluss	1/2" Außengewinde
Abgabemenge:	ca. 7 Liter/ Minute
Dosierung:	stufenlos verstellbar bis 2 %
Wasserfließdruck:	3 bis 5 bar
Systemtrennung:	Rohrtrenner nach DIN 1988, DVGW-geprüft
Schwenkauslauf:	200 mm
Material:	Montageplatte und Haube aus Edelstahl
Art.-Nr.:	627500

touchless D1



Unser Plus

- ohne Hautkontakt bedienbar durch einen Sensor
- exakte Dosierung von Händedesinfektionsmittel oder von Waschlotion
- besondere hygienische Sicherheit durch die „airless“ Soft-Einwegflasche
- ständige Füllstandskontrolle möglich
- serienmäßig verschlossen

Der touchless D1 wird nur im industriellen Markt angeboten.

Produkte

Art.-Nr.

touchless D1-Spender inkl. Tropfschale	668315
Breite x Tiefe x Höhe	14,6 x 12,1 x 33,9 cm

Zubehör

Art.-Nr.

Desinfektionssäule	668311
Schalenhalter für Säule	668312
Schalenhalter für die Wandmontage	668310
Posterhalter	134433

sm-PED



Unser Plus

- Sprühgerät zur schnellen alkoholischen Desinfektion der Füße und des Schuhwerks
- mechanisch arbeitendes Sprühgerät als Wand- oder Standgerät einsetzbar (ohne Wasser- und Elektroanschluss zu betreiben)
- Versprühen des Desinfektionsmittels durch Treten auf den Fußhebel gezielt aus vier Düsen
- Besprühen der durch den Hebel abgedeckten Fuß- bzw. Schuhfläche durch eine Düse und eigenständige Desinfektion des Pedals
- einfache Befüllung durch 5 und 10 Liter-Liefergebinde • € 0459

Abmessungen | Technische Daten

Breite:	26,7 cm
Tiefe:	37,5 cm (einschl. Fußpedal)
Höhe:	34,5 cm
Sprühleistung:	ca. 4 ml/Hub
Füllmenge:	5 l- und 10 l-Liefergebinde
Art.-Nr.:	688600

Niederdruck-Reinigungsanlagen

Unser Plus

- Schäumen, Spülen, Desinfizieren – alles mit einer Anlage
- Gewährleistung einer kostengünstigen Reinigung bei geringem Zeitaufwand
- einfache Bedienung
- geringer Geräuschpegel im Betrieb
- sehr hohe Reinigungseffizienz durch Niederdruck
- nur sehr geringe Aerosolbildung im Gegensatz zum Hochdruckverfahren
- Gewährleistung einer langen Einwirkdauer auf der Oberfläche (bei entsprechend geeigneten Schaumreinigern) durch effektive Schaumfunktion
- Aufbau kompletter Reinigungssysteme durch Auswahl und Kombination von verschiedenen Haupt- und Satellitenstationen

Abmessungen | Technische Daten

1 Hauptstation Callisto 5FDK

Breite x Tiefe x Höhe: 1.240 x 680 x 380 mm

Gewicht: 125 kg

Art.-Nr.: 655250

2 Satellit Mimas FD

Breite x Tiefe x Höhe: 380 x 190 x 380 mm

Gewicht: 10 kg

Art.-Nr.: 655350



Service aus reiner Hand

Dienstleistung im Dienste der Hygiene.

Das umfassende Service-Angebot von schülke macht Ihre Organisation einfacher. Sie erhalten kompetente Unterstützung zu allen Fragen und Einsatzgebieten Ihres Hygienemanagements.

Technischer Service

schülke ermöglicht auf Anfrage den Zugriff auf ein kompetentes und flexibles Team aus Service-Technikern zur Wartung, Inspektion und Instandhaltung Ihrer technischen Geräte.

Durch spezielle Schulungen ist unser Team in der Lage, die auf dem Markt befindlichen Dosiergeräte und -anlagen, auch die des Wettbewerbs, zu betreuen, zu reparieren und zu warten.



Beratung

Die Spezialisten von schülke beraten kompetent. Auch unsere handwerkliche Arbeiten zeichnen unsere Leistungsfähigkeiten aus.

Labor

schülke hat eines der größten und modernsten Forschungslabore in seiner Branche.

Unter anderem bewertet schülke im Labor die Qualität Ihres Wassers bei Hygieneproblemen.

Informationen

schülke ermöglicht Ihnen den regelmäßigen Zugriff auf Informationen zu aktuellen Themen, stets aufbereitet nach dem neuesten Stand der Rechtsprechung und der Wissenschaft. Darüber hinaus stehen Ihnen im Internet (www.schuelke.com) Datenbanken mit Dokumenten (Gutachten, Sicherheitsdatenblätter etc.) zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Schulungsteam

schülke bietet hygienerelevante Schulungen für Ihr Personal.

Das Robert Koch-Institut empfiehlt:

"Spender müssen vor dem erneuten Füllen gründlich gereinigt bzw. desinfiziert werden."

Die Aufbereitung eines Typ KH Spenders in Bildern.


1.

Die Demontage ist bei der Edelstahl- und Kunststoffpumpe identisch.



2.

Pumpenaustausch gemäß Bedienungsanleitung des jeweiligen Spenders für die Edelstahl- sowie für die Kunststoffpumpe.

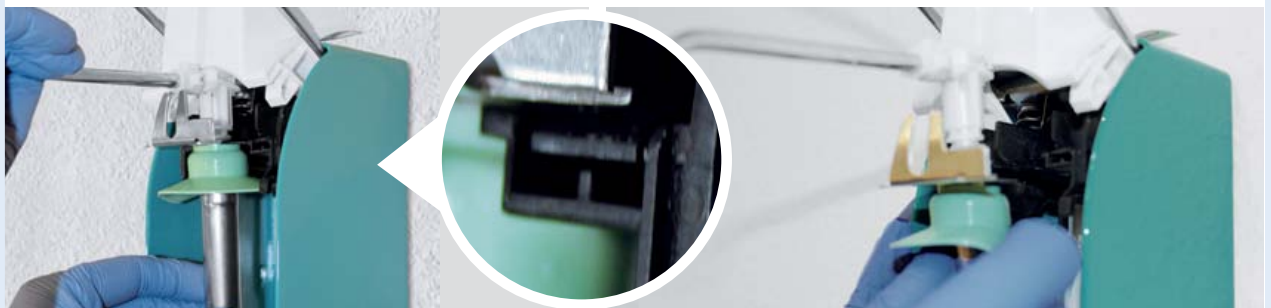

3.

Für die Edelstahlpumpe:

- Reinigung nur mit warmem Wasser und keine ätzenden (chlorhaltigen) Reiniger oder Scheuermittel verwenden!
- Steigrohr durchspülen bis sich alle Seifenreste und Rückfetter lösen.
- Anschließend mit Flächen-Desinfektionsmittel spülen und nach entsprechender Einwirkzeit gründlich, rückstandsfrei spülen.
- Sollte eine Verklebung des Saugventils durch Leerstehen entstanden sein, bitte nur mit heißem Wasser durchpumpen bis die Funktion wieder hergestellt ist.

Alternative Aufbereitung des Edelstahlsenders und der Edelstahlpumpe:

- Autoklavierbar bis 134 °C, 2 bar Überdruck, 20 Minuten Haltezeit



Für die Kunststoffpumpe:

- Zur äußeren Desinfektion empfehlen wir die mikrocid® AF wipes. Wischen Sie das Steigrohr inkl. des Auslaufes 3 x mit einem mikrocid® AF wipes Tuch ab und lassen Sie es jeweils 2 Min. einwirken.
- Zur Desinfektion der inneren Seite der Pumpe, verwenden Sie bspw. eine 2 %ige perform® Lösung. Pumpen Sie diese mit drei Pumphebungen durch die gesamte Pumpe und wiederholen Sie diesen Vorgang nach 30 Min.
- Nach insgesamt 1 h Einwirkzeit kann die Pumpe aus der perform® Lösung entnommen und leer gepumpt werden.

2 Minuten einwirken lassen

nach 30 Minuten wiederholen

60 Minuten einwirken lassen



Die Aufbereitung eines sm2 Spenders in Bildern.

Schritt 1

Der Wandspender lässt sich ohne Werkzeug zerlegen. Die glatten und polierten Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung sowie die Desinfektion mit perform® bzw. mikrozid® AF wipes.



Schritt 2

Setzen Sie zuerst eine 2 % perform® Lösung in einer 5 l-schülke Instrumentenwanne an. Legen Sie die Pumpe in die Lösung und pumpen Sie drei mal. Nach 30 Minuten Kontaktzeit den Vorgang wiederholen.



60 Minuten
warten



Schritt 3

Nach Beendigung der Einwirkzeit in hygienisch einwandfreiem Wasser (z. B. durch schülke filtration) betätigen Sie die Pumpe ca. 6 mal zum Klarspülen.



30 Minuten
warten



Schritt 4

Anschließend sollte das Steigrohr der Pumpe mit einem mikrozid® Tuch abgewischt werden. Eine Einwirk- bzw. Trocknungszeit von 2 Minuten sollte dabei beachtet werden.



2 Minuten
trocknen lassen



Schritt 5

Der Spender kann schnell und einfach wieder zusammengebaut werden und ist somit für den nächsten Einsatz bereit.



sm2 Pumpe

Ebenso lässt sich die Pumpe ohne Werkzeug zerlegen und aufbereiten.



Service aus reiner Hand

Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen und Unterlagen:

Kundenbetreuung | Verkauf | Service

Telefon 040/521 00-214 Telefon 040/521 00-112
Telefax 040/521 00-228 Telefax 040/521 00-228

Post: 22840 Norderstedt | E-Mail: ST.Norderstedt@schuelke.com

- 1 | **Dirk Bartels**
E-Mail: dirk.bartels@schuelke.com
Mobil: 0171 / 246 41 19
- 2 | **Dirk Winter**
E-Mail: dirk.winter@schuelke.com
Mobil: 0171 / 637 96 67
- 3 | **Tobias Kring**
E-Mail: tobias.kring@schuelke.com
Mobil: 0172 / 998 24 49
- 4 | **Markus Radon**
E-Mail: markus.radon@schuelke.com
Mobil: 0172/926 48 50
- 5 | **Heiner Franke**
E-Mail: heiner.franke@schuelke.com
Mobil: 0171/249 40 03
- 6 | **Felix Grohs-Vekeman**
E-Mail: felix.grohs-vekeman@schuelke.com
Mobil: 0171/630 54 70
- 7 | **Detlef Göddel**
E-Mail: detlef.goeddel@schuelke.com
Mobil: 0172 / 405 80 22
- 8 | **Maik Böttcher**
E-Mail: maik.boettcher@schuelke.com
Mobil: 0171 / 246 61 04
- 9 | **Wenzel Holecek**
E-Mail: wenzel.holecek@schuelke.com
Mobil: 0171 / 249 55 94
- 10 | **Rene Schmidt**
E-Mail: rene.schmidt@schuelke.com
Mobil: 0172 / 405 80 20
- 11 | **Stefan Kletzenbauer**
E-Mail: stefan.kletzenbauer@schuelke.com
Mobil: 0171 / 637 58 20
- 12 | **Tony Schumann**
E-Mail: tony.schumann@schuelke.com
Mobil: 0173 / 497 82 50
- 13 | **Peter Obermeier**
E-Mail: peter.obermeier@schuelke.com
Mobil: 0172 / 671 79 46



Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 521 00-0 | -318
www.schuelke.com

Ein Unternehmen der
Air Liquide-Gruppe

